

Ulike


AIR3

UI06WH ve UI06PR

KULLANMA KILAVUZU

IPL Lazer Epilasyon Aleti

AIR 3

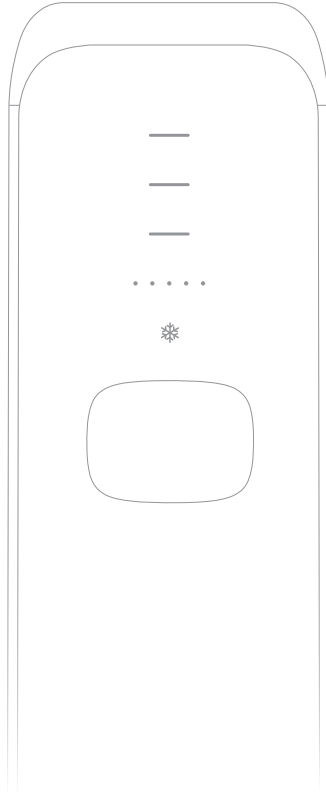

ENGLISH ————— 02-17

DEUTSCH ————— 20-35

FRANÇAIS ————— 28-53

ITALIANO ————— 56-70

ESPAÑOL ————— 72-87

TÜRKÇE ————— 89-103

İÇİNDEKİLER

93 - GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

95 - ÜRÜN BİLGİLERİ

96 - ÜRÜN YAPISI VE AKSESUARLARI

97 - KULLANIM ÖNCESİ HAZIRLIK

98 - NASIL KULLANILIR?

100 - KULLANIM SONRASI BAKIM

101 - SIKÇA SORULAN SORULAR (S.S.S.)

102 - ULİKE IPL EPİLASYON CİHAZI KORUYUCU
GÖZLÜK TANITMA, KULLANMA KILAVUZU ve
GARANTİ BELGESİ

Ulike'ı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

2013 yılında kurulan Ulike, ilk günden itibaren ev tipi IPL tüy alma cihazı teknolojilerine odaklanmıştır.

Ev tipi IPL lazer epilasyon işleminin güvenli, pürüzsüz ve acısız bir deneyim olması gerektiğine inanıyoruz. Bu cihaz, tam da sevdiğiniz ev tipi IPL lazer epilasyon sistemi olacak.

Yardıma ihtiyacınız olursa veya herhangi bir sorunuz olursa, bizimle e-posta yoluyla veya web sitemiz üzerinden sohbete katılmaktan çekinmeyin.

Size yardımcı olmak için buradayız!

www.hakman.com.tr

info@hakman.com.tr

Müşteri Hizmetleri & Çağrı Merkezi

0850 255 13 93



Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd.

Cihazı kullanmadan önce lütfen tüm kontrendikasyonlar, uyarılar ve güvenlik bilgileri dahil olmak üzere kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. Bu kılavuzdaki çizimler yalnızca referans amaçlıdır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

● DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER;

- Kullanımdan önce herhangi bir jel veya bakım ürünü (aloe vera jeli vb.) uygulamayın.
- Ürünü Kullanım Kılavuzu'nda belirtilen kurallara uygun olarak kurduğunuzdan ve kullandığınızdan emin olun.
- Kullanım Kılavuzu'nu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.
- Kullanım sırasında herhangi bir sorunuz olursa, ilgili dildeki çevrimiçi müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

- ⚠ TEHLİKE: Yanlış kullanım nedeniyle kişisel yaralanmalara yol açabilecek içerikler.
- ⚠ UYARI: Yanlış kullanım nedeniyle tehlikeli durumlara yol açabilecek içerikler.
- ⚠ DİKKAT: Yanlış kullanım nedeniyle kişisel güvenliği veya maddi hasarı etkileyebilecek içerikler.

● TEHLİKE

- Cihazı gözlemlere doğrudan uygulamayın, aksi takdirde cihazın yaydığı güçlü ışık kaynağı gözlerde hasara neden olabilir.
- Normal çalışma koşullarında, cihazın yan hava çıkışına doğrudan temas etmeyin, aksi takdirde çıkışın sıcaklığı ciltte yanıklara neden olabilir.
- Normal çalışma koşullarında, cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın, aksi takdirde yaralanmalara yol açabilir.
- Gelişim süreci devam ettiği için 16 yaş altı kullanımı önerilmez. 18 yaş altındaysanız, ebeveyn onayı almanız veya bir uzmana danışmanız tavsiye edilir.



● UYARI

- Talimatlara uyulmazsa, olumsuz etkiler ortaya çıkabilir.
- Kol altı bölgesine uygulama yaptıktan hemen sonra ter önleyici (antiperspirant) kullanmayın.
- Kullanım sırasında oluşabilecek yanma ve cihaz arızalarını önlemek için uygulama penceresini düzenli olarak kontrol edip temizleyin.
- Cihazın uygulama penceresini manyetik alandan etkilenebilecek nesnelere yaklaştırmayın; bu durum cihazda veya nesnelere hasara yol açabilir.
- Havalandırmaya delikleri tıkalıyken cihazı kullanmayın; bu durum cihazın duman çıkarmasına veya yangın riskine yol açabilir.
- Cihazın performansını korumak ve aşırı ısınmayı önlemek için uygulama penceresini siyah renkli yüzeylere/nesnelere doğrultmayın.
- Işığı kıyafetlere, saçlara veya diğer nesnelere doğrudan tutmayın; bu durum renk değişimine, yanmaya veya yüzey hasarına neden olabilir.
- Cihazı evcil hayvanlar üzerinde kullanmayın, bu durum yaralanmalara neden olabilir.
- Talimatlara uyulmazsa, gözlerde (kalıcı körlük riski dahil) veya ciltte hasar meydana gelebilir. Lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve talimatlara uyun.
- Aynı bölgeye tekrar tekrar uygulama yapmayın ve aşırı kullanımdan kaçının.
- Gereğinden fazla atış yapma veya çok sık kullanma, cildinizi zarar verebilir.
- Hatalı kullanım göz sağlığını tehlikeye atabilir; bu nedenle gözlerinizi mutlaka koruyun. Cihazı elmacık kemiğinden yukarıdaki bölgelerde veya göz çevresine çok yakın bölgelerde kesinlikle kullanmayın.
- Cihazın dahili güvenlik mekanizmalarını ihmal etmeyin. Koruyucu gözlük kullanımı ve cihazın cilde tam temas etmesi gibi güvenlik önlemlerini titizlikle uygulayın.
- Kullanımdan önce cildinizin uygun olup olmadığını test edin ve cilt durumunuzu kontrol edin.
- Kullanıma başlamadan önce mutlaka cilt testi yapın ve uygulama bölgesini 2 saat boyunca gözlemleyin.
- Uygulama yapılan bölgede herhangi bir anormallik (kızarıklık, su toplama vb.) oluşmadığı takdirde, cihazı güvenli kullanabilirsiniz.
- Kullanım sırasında koruyucu gözlük takın ve uygulama penceresini cildinizle tam temas edecek şekilde konumlandırın.
- Kullanım sonrasında cihaz üzerinde biriken tüy kalıntılarını ve cilt bakım ürünü artıklarını temizleyin. Bu işlem cihaz arızalarını önler ve cilt sağlığını korur.
- Bu güçlü ışığın gözlemlere doğru gelmemesi önemli. Gözlerinizi direkt güçlü ışığa maruz bırakmamak için talimatlar harfiyen uyun ve koruyucu gözlüğünüzü doğru şekilde takın.
- Yoğunluk seviyesini cilt tipinize göre ayarlayın; ilk kullanımda mutlaka Hassas Mod ile başlayarak cildinizi alıştırtın.
- Uygulama sonrası ciltte hafif bir sıcaklık hissi ve kızarıklık görülmesi normaldir.
- Cihaz çalışır durumdayken asla gözetimsiz bırakılmamalı ve kullanım bitiminde vakit kaybetmeden kapatılmalıdır.
- Uygulama öncesinde cildinizin temiz; tüy, nem, yağ veya kozmetik kalıntılarının tamamen arınmış olduğundan emin olun.
- Çalışma ortamı sıcaklığı 20°C'den fazla değişirse (düşük sıcaklıktan yüksek sıcaklığa veya tam tersi), cihazı kapatın. Yaklaşık 2 saat bekledikten sonra tekrar kullanın.
- Cihazı yanıcı ve patlayıcı maddelerin (sprey, yanıcı gazlar vb.) yakınında kullanmayın; bu durum yangın, elektrik çarpması ve ciddi yaralanmalara yol açabilir.
- Cihazın ideal çalışma sıcaklığı 5-30°C arasındadır. Kullanıma başlamadan önce oda sıcaklığının bu aralıkta olduğunu kontrol edin.
- Uygulama sonrası 48 saat boyunca, işlem gören bölgeyi doğrudan güneş ışığından ve UV ışınlarından koruyun.
- Cihazı doğrudan güneş ışığına veya uzun süreli ultraviyole (UV) ışığa maruz bırakmayın; bu durum cihazda ciddi ve kalıcı hasara yol açabilir.
- Cihaz açıldıktan sonra fan sesi duyulmuyorsa (fan çalışmıyorsa) cihazı kesinlikle kullanmayın. Fanın çalışmaması aşırı ısınmaya, duman oluşumuna veya yangın riskine neden olabilir.
- Cihazı banyo, duş veya suya yakın nemli ortamlarda kullanmaktan kaçının. Ürünü ve güç adaptörünü her zaman kuru tutun.
- Cihazın uzun süre kesintisiz kullanılması önerilmez. Cihazın ömrünü korumak için her 1 saatlik kullanımın ardından 10 dakika dinlendirin.
- Cihaz gövdesinde, lensinde veya güç kaynağında (adaptörde) herhangi bir hasar fark ederseniz kullanımı derhal durdurun.
- Cihaz üzerinde yetkisiz onarım veya modifikasyon yapmaya çalışmayın. Cihaz yalnızca üretici tarafından belirlenen yetkili teknik servislerde onarılmalıdır.



● Uygun Olmayan Durumlar

- Cilt hastalığı (örneğin alerjik dermatit) olanlar veya hassas cilt yapısına sahip kişiler, uygulama sırasında rahatsızlık hissedebilir. Herhangi bir olumsuz reaksiyon görülmesi durumunda cihazın kullanımı derhal durdurulmalıdır.
- Yanık, su toplamış bölge, kesik, açık yara, aktif cilt enfeksiyonu veya inflamasyon bulunan alanlara uygulama yapmayın.
- İşçiğe duyarlılığı artıran ilaçlar kullanıyorsanız, cihazı kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın; aksi takdirde cilt hasarı meydana gelebilir.

Aşağıdaki durumdaki kişilerin cihazı kullanması uygun değildir:

- Hamile, emziren ve regl dönemindeki kadınlar.
- Şeker hastalığı (diyabet), ışık hassasiyeti veya anormal yara iyileşmesi (keloid/hipertrofik skar) geçmişi olanlar.
- Ciddi kalp hastalığı, orta veya ileri derece hipertansiyonu olanlar.
- Kötü huylu tümör, folikülit (kıl kökü iltihabı) veya bulaşıcı cilt hastalığı bulunanlar.
- Kan pıhtılaşma bozukluğu olanlar veya antikoagülan (kan sulandırıcı) tedavisi görenler.
- Bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler (HIV, Lupus, Porfiri vb.).
- Cildi işçiğe karşı hassas olan, kolayca döküntü veya alerjik reaksiyon gösteren kişiler.
- Anormal kolajen metabolizmasına sahip olanlar.
- Kanama bozukluğu olanlar.
- Varisli damarların bulunduğu veya damar genişlemesi olan bölgelerde cihazı kullanmayın.
- Ciltte uçuk (Herpes simplex), aktif lezyon veya hematom (kan birikmesi/morluk) olan bölgelere uygulama yapmayın.

Aşağıdaki maddeleri içeren ürünleri kullanan kişilerin cihazı kullanmaması gerekir:

- İzotretinoin (akne tedavisi ilaçları).
- Meyve asitleri (AHA), Salisilik asit (BHA) ve Azelaik asit.
- Retinoidler veya A vitamini türevi içeren kremler.
- Son 30 gün içinde kimyasal tüy dökücü veya cilt beyazlatıcı ürün kullanmış olanlar cihazı kullanırken son derece dikkatli olmalıdır.
- Uçucu yağ içeren ürünlerle birlikte kullanmayın. Uygulama öncesinde cilt; tamamen temiz, kuru ve her türlü yağdan arındırılmış olmalıdır. Cilt üzerinde losyon, kayganlaştırıcı veya herhangi bir kozmetik ürün kalıntısı bulunmamalıdır.
- Cilt yüzeyinin temiz ve kuru olmaması, cihaz performansını düşürebilir ve cihazın zarar görmesine neden olabilir.
- Aspirin, bağışıklık baskılayıcılar ve işçiğe duyarlılık yaratan antibiyotikler (tetrasiklin, sülfü grubu vb.) kullananlar cihazı kullanmamalıdır.
- Yakın zamanda uygulama bölgesine dolgu veya toksin enjeksiyonu (botoks vb.) yaptırmış kişilerin cihazı kullanması önerilmez.

● Aşağıdaki Vücut Bölgeleri veya Durumlar İçin Kullanmayın

1/ Ağız içi, genital ıslak bölge, mukoza gibi alanlarda kullanmayın.	6/ Akne bulunan bölgelerde kullanmayın.	11/ Göbek deliğinin içinde kullanmayın.
2/ Plastik cerrahi uygulanmış bölgelerde kullanmayın.	7/ Leke ve benlerin üzerinde kullanmayın.	12/ Büyük damarların üzerinde kullanmayın.
3/ Gırtlak çıkıntısı (Adem elması) bölgesinde kullanmayın.	8/ Kaşlar ve saç üzerinde kullanmayın.	13/ Dövme, vücut boyası veya geçici boyalar bulunan bölgelerde kullanmayın.
4/ Göz küresi, göz kapağı ve göz çevresinde kullanmayın.	9/ Kulakta kullanmayın.	
5/ Baş ve saçlı deri üzerinde kullanmayın.	10/ Meme ucu ve meme ucu çevresindeki koyu renkli bölgede (areola) kullanmayın.	

Not: Bu liste tüm olası durumları kapsamayabilir. Cihazın kullanımının sizin için uygun olup olmadığından emin değilseniz, uygulamaya başlamadan önce mutlaka uzman bir doktora danışmanızı öneririz.

● Cihaz kullanımından sonra aşağıdaki yan etkiler gözlemlenebilir:


1/ Cilt yanıkları	3/ Kıl foliküllerinde ödem ve su toplaması (kabarık oluşumu)	5/ Kaşıntı ve ağrı
2/ Lokal kızarıklık ve şişlik	4/ Eritem (kızarıklık) ve pigmentasyon (renk değişikliği)	6/ Yara izi oluşumu

Not: Bu liste tüm olası yan etkileri kapsamayabilir. Uygulama sonrasında burada belirtilmeyen bir reaksiyonla karşılaşırsanız, cihaz kullanımını durdurarak bir uzman doktora danışmanızı ve konuyla ilgili müşteri hizmetlerimizi bilgilendirmenizi öneririz.

⚠ Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1. Bu cihaz tıbbi bir ürün değildir; hastalıkların tedavisi veya teşhisi amacıyla kullanılmamalıdır.
2. Beyaz veya gri tüylerin giderilmesi için kullanılması önerilmez.
3. Cilt rengi uygun olmayan kişiler cihazı kullanmamalıdır. (Cilt tonu uygunluğu için bkz. sayfa 97)
4. Uygulama öncesinde cildin doğrudan güneş ışığına veya yapay UV ışınlarına maruz kalmasından kaçının.
5. İlk kullanımda mutlaka Hassas Mod ile başlayın ve kolunuzun küçük bir bölgesinde cilt reaksiyon testi (yama testi) uygulayın.
6. Epilasyon sırasında, cihazın uygulama penceresinin cilde tam temas ettiğinden emin olun ve ardından işlemi gerçekleştirin.
7. Göz sağlığını korumak ve uygulama alanını net görebilmek için cihazı karanlık ortamlarda kullanmayın; ortamın yeterince aydınlık olduğundan emin olun.
8. Cihazın optik sistemini ve sensörlerini korumak için direkt güneş ışığı altında uygulama yapmayın.
9. Cihazı sert darbelerden koruyun ve kullanım sırasında şiddetli şekilde sarsmamaya özen gösterin.
10. Ürünün elektronik aksamına zarar vermemek için cihazı kapatmadan fişini doğrudan prizden çekmeyin.

Not: Verimli bir soğutma sağlamak ve ısı dağılımını optimize etmek için kullanım sırasında hava girişinin yukarıda, LCD ekranın ise aşağıda kalacak şekilde tutulmasına dikkat edilmelidir.

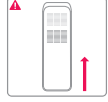

ÜRÜN BİLGİLERİ

● Ürün Genel Bilgileri

Geleneksel, iç bükey uçlu ve uygulama sırasında ısı biriktiren cihazların aksine, bu ürün klinik düzeyde Safir Temaslı Soğutma Teknolojisini kullanır. Patentli Safir Buz Soğutma Teknolojisi, uygulama sırasında cilt yüzeyindeki ısıyı anında düşürür. Isı birikmesini engelleyerek yanık riskini ve cilt tahrişini minimize eder, en hassas bölgelerde bile konforlu bir deneyim sunar. Safir düz başlık tasarımı, uygulama sırasında cildi hafifçe düzleştirerek kıl köklerini enerji kaynağına (ışık penceresine) daha yakın bir konuma getirir. Bu tasarım, kıl foliküllerinin ışık enerjisini emme verimliliğini artırarak daha kısa sürede daha kalıcı sonuçlar almanızı sağlar. Safir kristal başlık, yüksek ışık geçirgenliği sayesinde enerjiyi kayıpsız iletir ve pürüzsüz yüzeyi sayesinde kolayca temizlenerek hijyenik kullanım sunar. Parça değişimi gerektirmeyen uzun ömürlü entegre lamba tasarımı, cihazın ömrü boyunca ekstra bir lamba başlığı maliyeti çıkarmaz. Yüz, dudak üstü, koltuk altı, bikini hattı, kollar ve bacaklar gibi farklı bölgelerde güvenle kullanılabilir. Aksesuar satın alma ihtiyacını ve gizli ek maliyetleri ortadan kaldırarak tek başlıkla ekonomik bir epilasyon çözümü sunar. Cihazın sahip olduğu hassas filtreleme sistemi, cilt için etkisiz olan kısa dalga boylarını ve zararlı ışınları (UV) mükemmel şekilde süzerek güvenli ve cilde dost bir epilasyon deneyimi sağlar.

TEMEL PARAMETRELER

Air 3 Series	ÖZELLİKLER	
	Ürün Modeli	: UI06PR - UI06WH
Ürün Boyutu	: 179X58.5X34mm	
Güç Girişi	: 24V \leftrightarrow 2.8A	
Nominal Güç	: 67.2W	
Mod Sayısı	: 3 Seviye	
Uygulama Alanı	: 3.3cm ² ±0.25cm ²	
Atış Süresi	: 1.12ms - 7.44ms	
Dalga Boyu (Spektrum)	: 550nm-1200nm	
Atış Aralığı	: 0.33Hz-2.5Hz	
Üretici Firma	: Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd.	
Adres	: 810, Building 1, Xunmei Science and Technology Plaza, No. 8 Keyuan Road, Science Park Community, Yuehai Sub-District, Nanshan District, Shenzhen 518000, Guangdong, P.R. China	



SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI		ÇALIŞMA KOŞULLARI	
Saklama Sıcaklığı	-10-55°C	Çalışma Ortamı Sıcaklığı	5-30°C
Bağıl Nem	≤90%RH	Çalışma Bağıl Nemi	≤80%RH
Atmosfer Basıncı	50~106 kPa	Çalışma Atmosfer Basıncı	80~106 kPa

● Ürün yapısı ve aksesuarları



Ürün ve aksesuarları



Ürün Yapısı

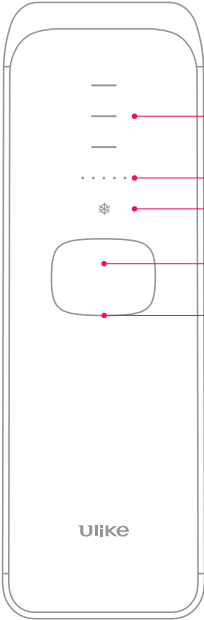
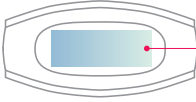


Güç (Açma/Kapama) ve Mod Ayarı Düğmesi

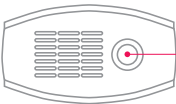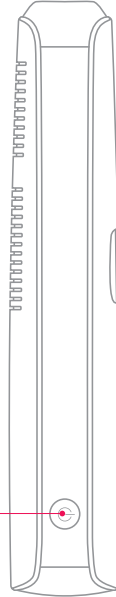

KULLANIM ÖNCESİ HAZIRLIK

● Başlarken

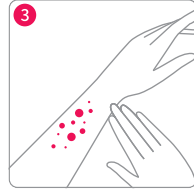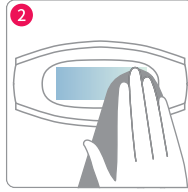

① Uygulama yapılacak bölgenin tüylerden tamamen arındırılmış (tıraş edilmiş), tamamen kuru ve yağsız olduğundan emin olun.

② Kristal Safir başlık (uygulama penceresi) üzerinde tüy, toz veya kir kalmadığını kontrol edin. Başlıkta herhangi bir hasar veya anormallik bulunmadığından emin olun. Eğer pencerede kir varsa, cihazın arızalanmasını ve olası cilt sorunlarını önlemek için başlığı yumuşak ve kuru bir bezle nazikçe temizleyin.

③ Cihazı geniş alanlarda kullanmadan önce, uygulama yapacağınız bölgenin küçük bir kısmında test atışı gerçekleştirin. Testten sonra cildinizi 2 saat boyunca gözlemleyin. Eğer uygulama yapılan alanda herhangi bir anormallik (aşırı kızarıklık, kabarcıklanma) oluşmazsa, cihazı güvenle kullanmaya devam edebilirsiniz. Cilt hassasiyet testi tamamlanmadan ve sonuçtan emin olunmadan geniş alanlarda epilasyon işlemine başlanması tavsiye edilmez.

● Mod Ayarı

Cihaz; farklı cilt hassasiyetlerine, vücut bölgelerine ve kıl renklerine uyum sağlamak amacıyla 3 özel mod sunar.

Hassas Mod (Soft Mode): Üst dudak gibi hassas bölgeler, koyu ten tonları ve genel olarak hassas cilt yapısına sahip kişiler için idealdir.

Vücut Modu (Body Mode): Kol ve bacak gibi geniş vücut bölgelerinde; orta veya düşük sertlikteki tüyler üzerinde etkilidir.

Güç Modu (Strong Mode): Özellikle kalın, sert ve inatçı tüylerin bulunduğu (kol, bacak gibi) bölgeler için uygundur. (Güç modu, en yüksek enerji seviyesinde çalıştığı için uygulama sırasında Hassas ve Vücut modlarına göre daha fazla sıcaklık hissetmeniz normaldir; bu durum cihazın arızalı olduğu anlamına gelmez.)

Cilt tipinize ve kıl renginize en uygun modu seçmek için lütfen aşağıdaki tabloyu kontrol edin.

Kıl Rengi \ Ten Rengi	Ten Rengi					
	Beyaz	Bej	Açık Kahverengi	Kahverengi	Koyu Kahverengi	Kahverengi/Siyah Ve Koyu Renkler
Beyaz / Gri	×	×	×	×	×	×
Kızıl	×	×	×	×	×	×
Soluk Altın Rengi	×	×	×	×	×	×
Koyu Altın Rengi	Vücut Modu Güç Modu	Vücut Modu Güç Modu	Vücut Modu Güç Modu	Hassas Mod Vücut Modu	×	×
Kahverengi	Vücut Modu Güç Modu	Vücut Modu Güç Modu	Vücut Modu Güç Modu	Hassas Mod Vücut Modu	×	×
Koyu Kahverengi	Vücut Modu Güç Modu	Vücut Modu Güç Modu	Vücut Modu Güç Modu	Hassas Mod Vücut Modu	×	×
Siyah	Vücut Modu Güç Modu	Vücut Modu Güç Modu	Vücut Modu Güç Modu	Hassas Mod Vücut Modu	×	×


Not: "X" ifadesi, ögenin uygulanabilir olmadığını belirtir.

• Uygulama sırasında ağrı veya aşırı rahatsızlık hissederseniz lütfen mod ayarını değiştirin. (Hafif bir sıcaklık veya yanma hissi normaldir.)


• Daha koyu tenli kişilerde cilt hassasiyeti riski daha yüksek olduğundan, uygulamanın Hassas Mod (Soft Mode) ya da Vücut Modu (Body Mode) ile yapılması önerilir. İlk kullanımda mutlaka Hassas Mod ile başlamanız tavsiye edilir.

NASIL KULLANILIR?


Kullanım Adımları

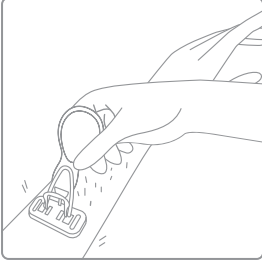


1. Uygulama yapacağınız bölgedeki tüyleri bir tıraş bıçağı yardımıyla tamamen tıraş edin. Tıraş bıçağını kuru cilde doğrudan uygulamayın. Cilt tahrişini önlemek için tıraş köpüğü/jeli kullanmanız veya tıraş işlemini duş sırasında yapmanız önerilir. Tıraş bıçağı keskindir. Ciltte çizik, kesik veya tahriş oluşmasını önlemek için işlemi dikkatli bir şekilde gerçekleştirin. Tıraş sonrası cildinizi durulayın ve cihazı kullanmadan önce bölgenin tamamen kuru olduğundan emin olun.

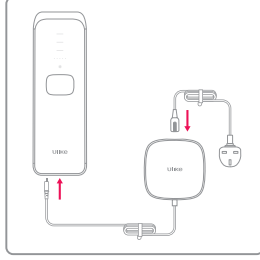


2. Güç kablosunu adaptöre sıkıca takın. Güç kablosunun ucunu, cihazın arka kısmında bulunan Güç Giriş Soketinde (Power Input) yerleştirin.

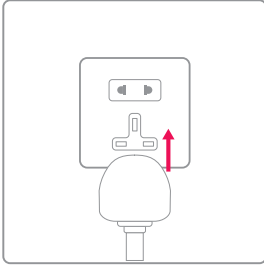

3. Cihazın fişini bir elektrik prizine takın.

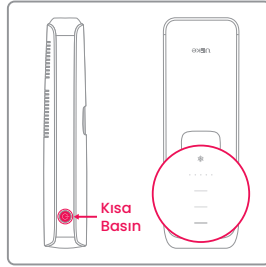

4. Cihazın yan tarafında bulunan Açma/Kapama (On/Off) düğmesine kısa bir süre basarak cihazı çalıştırın. Cihaz açıldığında, LCD panel üzerinde mevcut Mod Ayarı ve Buz Soğutma göstergelerinin aktif olduğunu göreceksiniz.

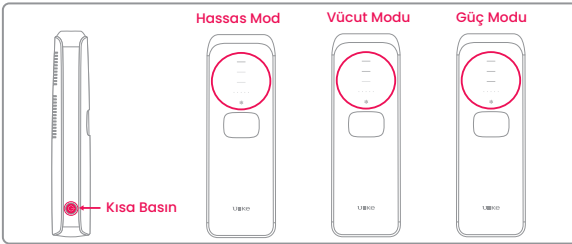


5.Mod Seçimi ve Değişirme


Cihazı çalıştırmak için gövdenin yan tarafında bulunan "Güç Açma/Kapama/Mod Değişirme" düğmesine kısa süreli basın. Cihaz açıkken aynı düğmeye kısa süreli basarak uygulama modları arasında geçiş yapabilirsiniz.

Modlar aşağıdaki döngü sırasıyla değişecektir:


Hassas Mod (Soft Mode) - Vücut Modu (Body Mode) - Güçlü Mod (Power Mode) - Vücut Modu (Body Mode) - Hassas Mod (Soft Mode)

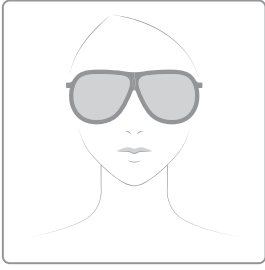

6. Uygulamaya (atış işlemine) başlamadan önce, kutu içeriğinde bulunan koruyucu gözlüğü mutlaka takınız.

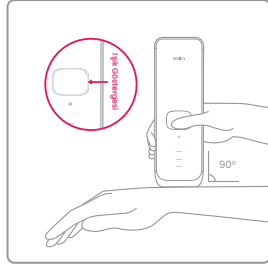

7. Kristal Safir başlığı (uygulama penceresi) uygulama yapacağınız bölgeye tam dikey (90° açı yapacak şekilde) yerleştirin. Cihaz cildinizle tam temas ettiğinde, Cilt Temas Sensörü (beyaz gösterge ışığı) yanacaktır. Bu ışığın yanması, cihazın atış yapmaya hazır ve güvenli durumda olduğunu gösterir. Beyaz gösterge ışığı yanarken Atış Düğmesine basın. Cihaz yoğun bir ışık patlaması gerçekleştirecek ve epilasyon işlemini başlatacaktır. Eğer beyaz gösterge ışığı yanmıyorsa, uygulama başlığı cildinize tam olarak oturmamış demektir. Güvenlik kilidi nedeniyle bu durumda cihaz ışık yaymayacaktır. Başlığı cildinize tam temas edecek şekilde yeniden konumlandırın.

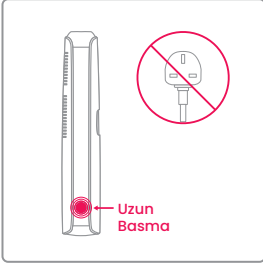


8. Uygulama tamamlandığında, cihazın yan tarafındaki Açma/Kapama (On/Off) düğmesine yaklaşık 1.2 saniye boyunca uzun basın. Cihazı düğmesinden kapatmadan asla doğrudan fişten çekmeyiniz. Cihaz açırken enerjinin aniden kesilmesi, cihaza zarar verebilir.

● Uygulama Yöntemleri

Otomatik Atış Yöntemi (Bacak ve Kol Gibi Geniş Alanlar İçin):


- Uygulama penceresini uygulama yapılacak bölgeye yerleştirin ve cildinizle tam temas ettiğinden emin olun.
- Cihaz cildi algıladığında, cilt temas sensörü göstergesi aktifleşerek (yanarak) tam temas sağlandığını onaylayacaktır.
- Atış düğmesine 1.2 saniye boyunca uzun basın. Otomatik atış göstergesi ışığı sabitlendiğinde "Otomatik Atış Modu" devreye girmiş olacaktır.
- Uygulama penceresinin ciltle temasını kesmeden cihazı bölge üzerinde yavaşça kaydırın. Atışlar belirli aralıklarla otomatik olarak gerçekleşecektir.
- Bölgenin tamamen tarandığından emin olmak ve atlanan alan bırakmamak için cihazı uygulama alanında iki kez ileri geri hareket ettirin.

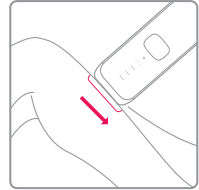

Not: Cihazı kaydırma hızınızı, atış sıklığına göre ayarlayarak daha homojen bir sonuç elde edebilirsiniz. Unutmayın; Hassas Mod'da (Soft Mode) atış hızı daha yüksek, Vücut Modu'nda (Body Mode) ise biraz daha düşüktür. Ayrıca, seçilen mod yükseldikçe atış hızı buna paralel olarak yavaşlayacaktır.

Tekli Atış Yöntemi (Parmaklar ve Dudak Üstü Gibi Küçük Alanlar):

- Uygulama penceresini uygulama yapılacak küçük bölgeye yerleştirin ve cildinizle tam temas ettiğinden emin olun.
- Cihaz cildi algıladığında, cilt temas sensörü göstergesi ışığı aktifleşerek (beyaz ışık sabitlenerek) başlığın cilde tam temas ettiğini onaylayacaktır.
- Atış düğmesine bir kez kısa süreli basın. Atış işlemi başarıyla gerçekleşecektir.
- Cihazı bir sonraki uygulama noktasına kaydırın. Cilt temas sensörü göstergesinin tekrar beyaz renkte sabitlenmesini bekleyin ve ardından atış düğmesine tekrar basarak işlemi sırasıyla tekrarlayın.

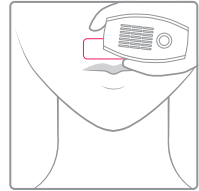


Not: Uygulama sırasında cildinizde aşırı sıcaklık hissederseniz, işleme birkaç saniye ara verin. Uygulama penceresinin tekrar soğumasını bekledikten sonra uygulamaya güvenle devam edebilirsiniz.

● IPL Lazer Epilasyon Cihazı Kullanım İpuçları

1- Arka arkaya yapılan atışlar nedeniyle cihazda doğal bir ısı artışı oluşabilir. Optimum soğutma etkisini korumak için, bir bölgedeki tüy alma işlemini tamamladıktan sonra uygulama penceresini yaklaşık 30 saniye boyunca o bölgenin üzerinde tutarak cildinizi dinlendirmenizi ve ardından diğer bölgeye geçmenizi öneririz.

2- Uygulama sırasında safir başlığı cildinize hafifçe bastırarak tam temas sağladığınızdan emin olun. Başlığın cilde tam oturması, ışık enerjisinin doğrudan kıl folikülüne (köküne) ulaşmasını sağlar. Bu sayede kıl kökü daha yüksek enerji emer ve tüy alma işlemi çok daha etkili sonuçlar verir. Safir buz teknolojisi, yüksek enerjili atışlar sırasında bile cildi etkin bir şekilde soğutarak ısı kaynaklı hassasiyeti azaltır ve cildinizi profesyonelce korur.

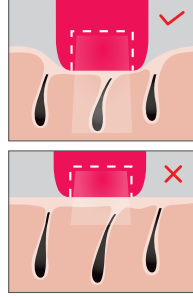

● Kullanım Döngüsü

1-4 Hafta

Haftada 3 kez kullanın

5. Haftadan itibaren

15 Günde bir veya Ayda bir kullanın

Tüy yapısı ve yoğunluğu kişiden kişiye farklılık gösterir. En iyi sonucu almak için seans sıklığını kendi tüy gelişim hızınıza göre esnetebilirsiniz. Eğer tüyleriniz normalden daha kalın ve sert ise, uygulama frekansını (haftalık seans sayısı) ve cihazın modunu cildinizin konforuna bağlı olarak bir miktar artırabilirsiniz.

KULLANIM SONRASI BAKIM

● Uygulama Sonrası Bakım & Öneriler

- Uygulamadan sonraki ilk 6 saat boyunca işlem gören bölgenin suyla temas etmemesine özen gösterin. Bu sürenin sonunda cildi nemlendirmek için saf içerikli nemlendiriciler kullanabilirsiniz.
- Uygulama bölgesinde parfüm, alkol bazlı tonikler, maskeler veya granülü (peeling etkili) sert kozmetik ürünler kullanmaktan kaçınin.
- Uygulama sonrasında ilk 48 saat boyunca doğrudan güneş ışığına veya UV ışınlarına maruz kalmayın. Gerekliyse bölgeye bir güneş kremi sürün.
- Güneşlenmek veya solaryum gibi yapay bronzlaşma yöntemleri ciltte kararma, kızarıklık, şişme veya iltihaplanmaya yol açabilir. Eğer cildinizde güneş yanığı oluştuysa, bölge tamamen iyileşene kadar (en az 1 hafta) cihazı kullanmaya ara verin.
- Tüy alma işlemi sırasında yapay bronzlaşma (solaryum vb.) yapılması yasaktır.
- Epilasyon yapılan bölgeye yönelik herhangi bir estetik cerrahi veya medikal operasyon planlıyorsanız, işlemden önce mutlaka doktorunuza danışın.
- Uygulama sırasında veya sonrasında kendinizi iyi hissetmezseniz veya cildinizde beklenmedik bir tepki oluşursa cihazı kullanmayı bırakın ve bir doktora danışın.

● Temizlik ve Bakım

- Cihazınızdan her kullanımda en iyi sonucu almak ve ürün ömrünü uzatmak için her uygulama öncesinde ve sonrasında düzenli temizlik yapılması kritik önem taşır. Toz ve tüy birikintileri, cihazın performansını düşürebilir ve uygulama kalitesini olumsuz etkileyebilir.
- Temizliğe başlamadan önce cihazın kapalı olduğundan ve fişinin çekili olduğundan emin olun. Cihazın ve kristal safir başlığın tamamen soğumasını bekleyin.
 - Uygulama penceresinin (safir yüzey) aynalı kısmını temizlemek için sadece yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
 - Cihazı -10°C ile 55°C arasında, kuru ve tozsuz bir ortamda saklayın.
 - Cihazı veya aksesuarlarını asla musluk altında yıkamayın veya bulaşık makinesine koymayın.
 - Temizlik sırasında çelik tel, aşındırıcı temizleyiciler (diş macunu vb.) veya korozif sıvılar (benzin, tiner, aseton vb.) kesinlikle kullanmayın.
- Not: Eğer su ile temizlik yeterli olmazsa, bezi birkaç damla yüksek konsantrasyonlu alkol (maksimum %95) ile nemlendirerek optik yüzeyi nazikçe silebilirsiniz.



● Çevre Koruma

Bu ürün elektr onik bileşenler içermektedir. Çevreyi korumak adına, ürünü lütfen genel evsel atıklarla birlikte çöpe atmayın. Cihazınızı, bölgenizdeki elektronik atık toplama noktalarına ve ya yetkili geri dönüşüm merke zlerine teslim edin. Doğru imha yöntemi, değerli kaynakların geri kazandırılmasını sağlar ve çevre sağlığı üzerindeki olası olumsuz etkilerin önlenmesine yardımcı olur.



Uyumluluk ve Standartlar

Bu cihaz aşağıdaki uluslararası güvenlik ve uyumluluk standartlarına uygundur:

Directives 2014/30/EU and 2014/35/EU
EN 60335-1:2012+A11:2014+A12:2017+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021
EN 60335-2-23:2003+A1:2008+A2:2015
EN 62233:2008
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A1:2019

Not: Cihazın düzgün çalışması için yetkili servis dışında müdahalede bulunmamanız önerilir.



SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

Bu bölüm, ürünü kullanırken karşılaşılabileceğiniz olası sorunları ve bunlara yönelik çözüm önerilerini içermektedir. Eğer aşağıdaki çözüm önerileriyle sorunu gideremezseniz, lütfen bölgenizdeki yetkili müşteri hizmetleri merkezi ile iletişime geçiniz.

Cihazda olağandışı bir durum oluştuğunda veya teknik bir arıza giderilemediğinde, lütfen ilgili dilde hizmet veren satış sonrası müşteri hizmetleri birimize başvurun.

Lütfen satın alma faturanızı ve garanti belgenizi güvenli bir yerde saklayınız. Ürünün arızalanması durumunda, yetkili servis noktalarımıza bu belgelerle birlikte başvurmanız gerekmektedir.

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Cihaz çalışmıyor	Güç bağlantısı sağlanmamış olabilir.	Güç kablosunun takılı olup olmadığını kontrol edin.
Cihaz ışık atışı yapmıyor	Cihaz başlığının veya gövdesinin sıcaklığı çok yükselmiş olabilir.	Cihazı kapatın ve tamamen soğuması için birkaç dakika bekleyin.
	Başlık cilde tam temas etmiyor olabilir.	Başlığı cilde tam olarak yerleştirin ve ışık göstergesinin yanıp yanmadığını kontrol edin.
Gösterge ışığı yanmıyor	Cihazda temassızlık veya arıza olabilir.	Güç kaynağını kontrol edin. Sorun devam ederse hemen servise başvurun.
Uygulama sırasında koku oluşuyor	Filtre kirlenmiş olabilir. Uygulama bölgesindeki tüyler tıraş edilmemiş olabilir.	Filtreyi temizleyin. Uygulama öncesi bölgeyi iyice tıraş edin ve modunu değiştirin.
Uygulama sırasında dayanılmaz acı hissediliyor	Vücutta tüy kalıntıları olabilir.	Cihazı kullanmadan önce, ışık atışı yapılacak bölgedeki tüyleri lütfen jilet yardımıyla tamamen tıraş edin. Eğer tıraş işlemi cildinizde aşırı tahrişe veya kızarıklığa neden oluyorsa, tüylerinizi bir makas veya düzeltici yardımıyla mümkün olan en kısa seviyeye (cilt yüzeyine sıfır olacak şekilde) indirin.
	Uygulama yapılan bölge uygun olmayabilir.	İç dudaklar, vajina, anüs, meme uçları ve meme ucu çevresi (areola) üzerine uygulama yapmayınız. Erkekler için, yüz bölgesi (sakal/bıyık alanı) ve penis üzerine uygulama yapmayınız.
	Seçilen mod uygun olmayabilir.	Modu, daha konforlu olacak şekilde değiştirin.
	Uygulama penceresi zarar görmüş olabilir.	Cihazın uygulama penceresi hasarlıysa, hemen yetkili teknik servise gönderin.
Uygulama sonrası uygulama bölgesinde kızarıklık meydana geliyor	Ciltte hafif kızarıklık olması normaldir ve zamanla geçer.	Cildi yatıştırmak için aloe vera jeli veya cihazınızda bulunan özel kristal safir başlığını kullanarak "buz modu" ile cildinize soğuk kompres yapın.
Epilasyon etkisizliği yetersiz olması	Seçilen mod, sizin için yetersiz kalmış olabilir.	Bir sonraki kullanımda mod değiştirin.
	Atış yapılan alanlar arasında boşluk kalmış olabilir.	Işık atışlarını (flasları) birbirine çok yakın mesafelerde gerçekleştirip her yeni atış alanının bir önceki atış alanıyla hafifçe üst üste gelmesini sağlayın.
	Cihaz tüy renginiz üzerinde etkili olmayabilir.	Açık renkli tüylerde cihazın etkisi düşük olabilir.
Cihaz kullanım sırasında aşırı ısınıyor ve nemli hissettiriyor	Kullanım sıklığı yeterli olmayabilir.	Tüm tüylerin etkili bir şekilde temizlenmesi için, lütfen size sunulan "Önerilen Uygulama Takvimi"ne (Seans sıklığı ve süresi) tam olarak uyunuz.
	Cilt ışık enerjisine yavaş tepki veriyor olabilir.	Gözle görülür ve kalıcı bir pürüzsüzlük için cihazın en az 5 ay boyunca kesintisiz ve düzenli kullanılması önerilir.
Cihaz kullanım sırasında aşırı ısınıyor ve nemli hissettiriyor	Cihaz ara vermeden, çok uzun süre boyunca çalıştırılmış olabilir.	Cihazı kapatın, bir süre soğumasını bekleyin ve ardından tekrar kullanın.

Ulike

IPL LAZER EPİLASYON CİHAZI KORUYUCU GÖZLÜK TANITMA, KULLANMA KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ

Bu koruyucu gözlük, IPL (Yoğun Atımlı Işık) teknolojisine sahip epilasyon cihazlarının kullanımını sırasında gözlerin güçlü ışık atımlarından korunmasına yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır.

Koruyucu gözlük, cihazın yaydığı yoğun ışık enerjisinin doğrudan göze ulaşmasını azaltarak kullanıcıyı güvenliğini desteklemek amacıyla tasarlanmıştır.

KULLANIM, BAKIM VE GARANTİ BİLGİLERİ

● Kullanım Talimatları

- Ulike IPL epilasyon cihazı ile birlikte verilen koruyucu gözlük, cihazın yaydığı yoğun ışık atımlarına karşı gözlerin korunmasına yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır.
- Cihazı kullanmadan önce koruyucu gözlüğü takmanız önerilir.
- Gözlüğün yüzünüze tam oturduğundan ve görüş alanınızı engellemediğinden emin olunuz.
- Cihaz çalışırken doğrudan ışık kaynağına çıplak gözle bakmayınız.
- Kullanım sırasında gözlüğü çıkarmayınız.

● Temizlik ve Bakım

Koruyucu gözlüğün kullanım ömrünü uzatmak için aşağıdaki önerilere dikkat ediniz:

- Gözlüğü temizlerken önce su ile durulayınız.
- Camları temizlemek için yumuşak ve temiz bir bez kullanınız.
- Camların çizilmesini önlemek için sert yüzeylerle temas ettirmeyiniz.
- Temizlik sırasında kağıt mendil, peçete veya sert yüzeyli materyaller kullanmayınız.
- Alkol, solvent veya aşındırıcı kimyasal maddeler kullanmayınız.
- Gözlüğü yüksek sıcaklığa maruz bırakmayınız.
- Gözlüğü araç içinde veya doğrudan güneş ışığı altında uzun süre bırakmayınız.
- Kullanmadığınız zamanlarda gözlüğü koruyunuz.
- Gözlüğü yüzünüzden çıkarırken iki sapından tutarak çıkarınız.

● Garanti Şartları

- Koruyucu gözlük için garanti süresi, ürünün tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.
- Garanti kapsamında ürünün tüm parçaları üretim hatalarına karşı garanti altındadır.
- Ürünün ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması

Hakkında Kanun kapsamında aşağıdaki haklardan birini kullanabilir:

- Sözleşmeden dönme
- Satış bedelinden indirim isteme
- Ücretsiz onarım talep etme
- Ürünün ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme
- Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli veya başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin ürünün onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
- Satıcı, üretici ve ithalatçı; tüketicinin bu haklarını kullanmasından müteselsilen sorumludur. Ürünün tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, arızanın yetkili servis veya satıcıya bildirildiği tarihten itibaren başlar.
- Kullanım kılavuzuna aykırı kullanım sonucu oluşan hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
- Tüketiciler şikayet ve itirazlarını Tüketici Hakem Heyetleri veya Tüketici Mahkemelerine yapabilirler.

● Destek ve Servis

Ürünle ilgili herhangi bir sorun yaşamanız halinde ürünü satın aldığınız satıcıya veya yetkili servis noktasına başvurunuz.

● Ürün Tanımı

Ürün Adı: IPL Koruyucu Gözlük

Ürün Türü: Koruyucu gözlük

Kullanım Amacı: IPL epilasyon cihazlarının kullanımında gözleri yoğun ışık atımlarından korumaya yardımcı olmak

● Kullanım Amacı

Bu koruyucu gözlük:

- IPL epilasyon cihazı kullanımı sırasında gözleri korumak amacıyla kullanılır.
- Yoğun ışık atımlarına doğrudan maruz kalmayı azaltmaya yardımcı olur.
- Cihaz kullanımı sırasında kullanıcı veya uygulama yapılan kişinin göz güvenliğini destekler.

● Kullanım Talimatları

- IPL epilasyon cihazını kullanmadan önce koruyucu gözlüğü takınız.
- Gözlüğün yüzünüze tam oturduğundan emin olunuz.
- Cihaz çalışırken doğrudan ışık kaynağına çıplak gözle bakmayınız.
- İşlem süresince gözlüğü çıkarmayınız.
- Kullanım tamamlandıktan sonra gözlüğü çıkararak güvenli bir yerde saklayınız.

● Güvenlik Talimatları

- Koruyucu gözlük yalnızca IPL epilasyon cihazları ile kullanım için tasarlanmıştır.
- Hasarlı, çizilmiş veya kırılmış gözlükleri kullanmayınız.
- Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız.
- Cihaz çalışırken gözlüğü çıkarmayınız.
- Bu ürün tıbbi amaçlı bir koruyucu ekipman değildir.

● Bakım ve Temizlik

- Gözlüğü temizlemek için yumuşak ve kuru bir bez kullanınız.
- Aşındırıcı kimyasal maddeler kullanmayınız.
- Alkol, solvent veya sert temizleyiciler kullanılması önerilmez.
- Temizleme sırasında cam yüzeylerin çizilmemesine dikkat ediniz.

● Saklama Koşulları

- Serin ve kuru bir ortamda saklayınız.
- Doğrudan güneş ışığına uzun süre maruz bırakmayınız.
- Yüksek sıcaklık ve nemden uzak tutunuz.

● Kullanım Ömrü

Ürünün tavsiye edilen kullanım ömrü 5 yıldır.

GARANTİ BELGESİ

ÜRETİCİ FİRMA

Junneg Electronic Technology (Huizhou) Co., Ltd.
Gaowu District, Dongfeng Village, Huiyang District, Huizhou City, China
Standart EN ISO 12312 1:2022/A11:2024

İTHALATÇI / DAĞITICI FİRMA

HAKMAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Adres: Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:113 Barbaros Plaza İş Merkezi Beşiktaş – İstanbul / Türkiye
Telefon: (0212) 217 11 60
Faks: (0212) 272 25 92
Müşteri Hizmetleri: 0850 255 13 43
E-posta: info@hakman.com.tr

FİRMA YETKİLİSİ

İmza Ve Kaşe

HAKMAN ELEKTRONİK SANAYİ
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Sakarya Bulvarı No: 113/3 Beşiktaş / İstanbul
Mersis No: 34710000000000000000
Tic Sic No: 272200
Vergi No: 34710000000000000000

MALİN

Cinsi : Koruyucu Gözlük
Markası : ULIKEBEAUTY
Modeli : UJ02
Bandrol Ve Seri No :
Garanti Süresi : 2 Yıl
Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü
SATICI FİRMANIN

Ünvanı :

Adresi :

Telefonu :

Faks :

E Posta :

Fatura Tarihi Ve No'su:

Teslim Tarihi ve Yeri :

Yetkilinin İmzası :

Firmanın Kaşesi :

TARİH/İMZA/KAŞE

Müşterinin Adı Soyadı :

Müşteri Adresi :

Telefonu :

GARANTİ ŞARTLARI

(1)Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

(2)Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

(3)Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- d- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

(4)**Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

(5)**Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

(6)Malın tamir süresi **20 iş gününü**, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir,

(7)Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

(8)Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

(9)Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Ticaret Bakanlığı**

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir,

Tüketicinin garanti ile ilgili hakları

Ücretsiz onarım isteme hakkı

(1)Tüketicinin, Kanununun 11. maddesinde yer alan seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

(2)Tüketici, ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı, tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin diğer hakları

(1) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

(a)Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

(b)Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

(c)Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

(2)Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

(3)Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır.

(4)Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkını seçmesi durumunda satıcı, üretici veya ithalatçının, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz iş günü içerisinde, bu talebi yerine getirmesi zorunludur.

(5)Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen raporun, arızanın bildirim tarihinden itibaren o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenmesi zorunludur.

Değiştirilen malın garanti süresi .

(1) Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Kullanım hatası

(1)Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

(2)Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

(3)Tüketiciler, ikinci fıkrada belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

Tüketicinin seçimlik hakları

(1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşın bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

d) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür,

(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

(3)Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl 'tüketicie iade edilir.

(6) Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar;

Ürünün bakımını kendiniz yapmaya kalkışmayınız. Daima kurulum ve montaj talimatlarını yakından takip ediniz. Aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyunuz. Daha sonraki durumlar için saklayınız.

- 1) Ürün üzerindeki bütün işaret ve talimatlara uyunuz.
- 2) Temizlemeden önce ürünü duvar fişinden çekiniz. Temizlemek için likit veya aerosol temizleyici kullanmayınız. Kuru veya nemli bez kullanın.
- 3) Ürünü su yakınlarında kullanmayın. ✓
- 4) Ürünü sabit olmayan bir düzlem, masa veya stand üzerinde yerleştirmeyiniz. Ürün düşebilir ve ciddi zarar görebilir.
- 5) Ürün hiçbir zaman ısıtıcı veya ısıtma kaynağı ya da uygun havalandırma yapılamayan bir yerde yerleştirilmemelidir, –
- 6) Ürünün içine asla yabancı cisimler sokulmamalı. Çünkü bu cisimler tehlikeli yüksek voltaj noktalarına dokunabilir yada parçaları kısa devre yapabilir. Bu da yangın ya da elektrik çarpmasına sebep olabilir, Ürünün üstüne ve içine asla sıvı maddeler dökmeyin, damlatmayın.
- 7) Ürün, arkasındaki etikette belirtilen güç kaynak tipine uygun olarak çalıştırılmalıdır. Eğer uygun güç kaynağından emin değilseniz, bu durumda satıcınıza veya yerel elektrik şirketine danışın.
- 8) Güç kablosunun üzerinde hiçbir sey kalmamasına dikkat edin. İnsanların kablo üzerinde basabilecekleri bir yerde bulundurmayınız.

DİKKAT !
GARANTİDEN YARARLANMAK İÇİN SAKLAYINIZ.

GARANTİ BELGESİ

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : HAKMAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.
MERKEZ ADRESİ : Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:113 Barbaros Plaza İş Merkezi
Beşiktaş – İstanbul
TELEFONU : (0212) 217 11 60
FAKSI : (0212) 272 25 92
MÜŞTERİ HİZMETLERİ : 0850 255 13 43
E Posta : info@hakman.com.tr

FİRMA YETKİLİSİ

İmza Ve Kaşe

HAKMAN ELEKTRONİK SANAYİ
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:113 K.5
Barbaros Plaza İş Merkezi Beşiktaş / İstanbul
Mersis No: 345 900 5400 0001
Mersis No: 0455 9386 5900 0026

MALIN

Cinsi : Epilasyon Cihazı :
Markası : Ulike
Modeli : UI06WH – UI06PR
Bandrol Ve Seri No :
Garanti Süresi : 2 Yıl
Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü

SATICI FİRMANIN

Ünvanı :
Adresi :
Telefonu :
Faks :
E Posta :
Fatura Tarihi Ve No'su :
Teslim Tarihi ve Yeri :
Yetkilinin İmzası :
Firmanın Kaşesi :

TARİH/İMZA/KAŞE

Müşterinin Adı Soyadı :
Müşteri Adresi :
Telefonu :



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PIYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SATIŞ SONRASI HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

Belgenin Veriliş Tarihi ve
Sayısı: 15.08.2023 / 65473

Belgenin Geçerlilik Tarihi: 15.08.2025

İmalatçı ve İthalatçı Firmanın

Ünvanı :

HAKMAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ-
DİKİLİTAŞ MAH.EMİRHAN CAD. BARBAROS PLAZA İŞ MRK.NO:113/C
BEŞİKTAŞ İSTANBUL

Merkez Adresi :

Verilen Hizmetin Kapsamı :

TS 10079 Yetkili servisler - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikle ve/veya gazla
çalışan alet veya cihazlar - kurallar

Bu belgenin kullanılmasına; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca, T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Sinan DAĞLI
Bakan a.
Daire Başkanı

